

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



焼結装置シリーズ

真空乾燥機

DZF

真空乾燥機は生化学、化学薬品、医療、農業研究、環境保護など幅広い分野で粉末乾燥、ベーキング、ガラス容器の消毒・滅菌に使用されます。

<https://www.labballmill.com/ja/products/sintering-series/vacuum-drying-oven.html>

Generated at 2026-07-30 21:11:09



製品概要

真空乾燥機は生化学、化学薬品、医療、農業研究、環境保護など幅広い分野で粉末乾燥、ベーキング、ガラス容器の消毒・滅菌に使用されます。



Vacuum Drying Oven

Microcomputer Temperature Controller
Precise and Reliable Temperature Control

Electronically Controlled
Vacuum Level

Independent Temperature
Control by Layer

Tempered, Explosion-Proof
Double-Layer Glass Door



Vacuum Drying Oven

Microcomputer Temperature Controller
Accurate and Reliable Temperature Control

Electronic Vacuum Control

Independent Temperature Control by Layer

Tempered, Shatter-Resistant
Double-Layer Glass Door





製品紹介


真空乾燥オーブンは、生化学、化学医薬品、医療と健康、農業科学研究、環境保護などの研究および応用分野で、粉末の乾燥、ベーキング、およびさまざまな種類のガラス容器の消毒と滅菌に広く使用されています。特に、熱に弱く、分解しやすく、酸化しやすい物質や複雑な成分を含むものの迅速かつ効率的な乾燥に適しています。

DZF Series

Product Details

Microcomputer Intelligent Controller

User password control,
built-in multifunction
memory menu

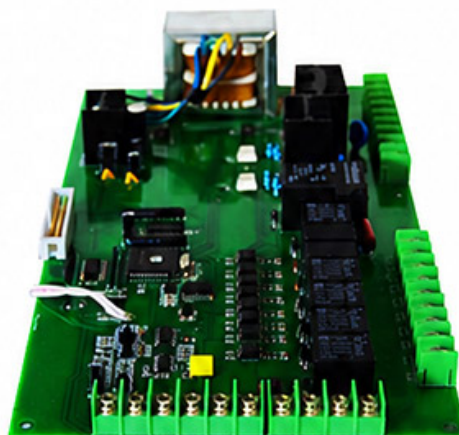

Three-core Temperature Sensor

Fast response to step
changes in temperature,
minimal self-heating effect

Vacuum Sensor

Provides accurate pressure readings
for effective stability control
of the vacuum system



生化学、化学医薬品、医療・健康、農業科学研究、環境保護などの研究・応用分野

技術的パラメータ

製品名	モデル	スタジオ仕様MM (高さ×幅×奥行き)	外観仕様MM (高さ×幅×奥行き)	電圧V	パワ KW	温度℃	真空度Pa	正確さ℃	ポラティ ティ℃	梱包重量KG (木枠含む)	述べる
真空乾燥炉 (冷間圧延プレートライナー)	DZF-6020	310×265×280	450×635×465	220	0.9	50~200	<133	±0.5	±1%	52.5	デジタル表示インテリジェント温度コントローラー、タイミング範囲は0~999分です。オプションの真空ポンプ
	DZF-6050	400×370×350	570×750×515	220	1.4	50~200	<133	±0.5	±1%	75	
	DZF-6090	485×440×425	620×780×600	220	2.4	50~200	<133	±0.5	±1%	112	
真空乾燥炉 (ステンレスライナー)	DZF-6020S	310×265×280	450×635×465	220	0.9	50~200	<133	±0.5	±1%	52.5	
	DZF-6050S	400×370×350	570×750×515	220	1.4	50~200	<133	±0.5	±1%	75	
	DZF-6090S	485×440×425	620×780×600	220	2.4	50~200	<133	±0.5	±1%	112	

製品特長

1. Cuboid Studioマイコン温度コントローラー、正確で信頼性の高い温度制御。
2. 強化防弾二重ガラスドアにより、スタジオ内のオブジェクトがはっきりと見えます。
3. ボックスドアの気密性は調整可能で、一体形成されたシリコンゴムドアシールによりボックス内の高真空が確保されます。
4. スタジオは耐久性を確保するためにステンレス鋼板（またはブラシ板）で作られています。
5. 保管、加熱、試験、乾燥はすべて無酸素または不活性ガスが充満した環境で行われるため、酸化が起こりません。
6. 加熱時間が最も短く、従来の真空乾燥炉と比較して加熱時間を50%以上短縮 | 真空オープン。

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。