

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



SÉRIE DE SINTERIZAÇÃO

Estufa de Vácuo

DZF

Estufa a vácuo para secagem de pós, esterilização e desinfecção de vidrarias, amplamente utilizada em bioquímica, farmacêutica, saúde, pesquisa agrícola e meio ambiente.

<https://www.labballmill.com/pt/products/sintering-series/vacuum-drying-oven.html>

Generated at 2026-07-30 21:11:15



Visão geral do produto

Estufa a vácuo para secagem de pós, esterilização e desinfecção de vidrarias, amplamente utilizada em bioquímica, farmacêutica, saúde, pesquisa agrícola e meio ambiente.



Vacuum Drying Oven

Microcomputer Temperature Controller
Precise and Reliable Temperature Control

Electronically Controlled
Vacuum Level

Independent Temperature
Control by Layer

Tempered, Explosion-Proof
Double-Layer Glass Door



Vacuum Drying Oven

Microcomputer Temperature Controller
Accurate and Reliable Temperature Control

Electronic Vacuum Control

Independent Temperature Control by Layer

Tempered, Shatter-Resistant
Double-Layer Glass Door





Introdução do produto


Os fornos de secagem a vácuo são amplamente utilizados em campos de pesquisa e aplicação, como bioquímica, produtos químicos farmacêuticos, medicina e saúde, pesquisa científica agrícola, proteção ambiental, etc. para secagem de pó, cozimento e desinfecção e esterilização de vários tipos de recipientes de vidro. É especialmente adequado para a secagem rápida e eficiente de substâncias sensíveis ao calor, facilmente decompostas e facilmente oxidadas e itens com componentes complexos.

DZF Series

Product Details

Microcomputer Intelligent Controller

User password control,
built-in multifunction
memory menu

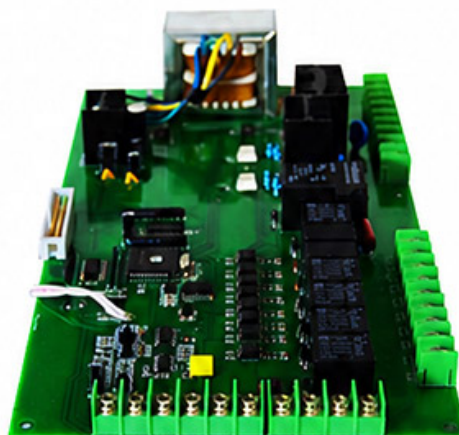

Three-core Temperature Sensor

Fast response to step
changes in temperature,
minimal self-heating effect

Vacuum Sensor

Provides accurate pressure readings
for effective stability control
of the vacuum system



Campos de pesquisa e aplicação, como bioquímica, produtos químicos farmacêuticos, medicina e saúde, pesquisa científica agrícola, proteção ambiental, etc.

Parâmetros técnicos

Nome do produto	modelo	Especificações do estúdioMM (Altura x Largura x Profundidade)	Especificações de aparência MM (Altura x Largura x Profundidade)	Tensão V	PotênciaKW	temperatura°C	Grau de vácuo Pa	Precisão°C	Volatilidade°C	Peso da embalagemKG (Incluindo moldura de madeira)	Observação
Forno de secagem a vácuo (forro de placa laminada a frio)	DZF-6020	310×265×280	450×635×465	220	0.9	50~200	<133	±0.5	±1%	52.5	Controlador de temperatura inteligente com display digital, O intervalo de tempo é de 0 a 999 minutos. Bomba de vácuo opcional
	DZF-6050	400×370×350	570×750×515	220	1.4	50~200	<133	±0.5	±1%	75	
	DZF-6090	485×440×425	620×780×600	220	2.4	50~200	<133	±0.5	±1%	112	
Forno de secagem a vácuo (revestimento em aço inoxidável)	DZF-6020S	310×265×280	450×635×465	220	0.9	50~200	<133	±0.5	±1%	52.5	
	DZF-6050S	400×370×350	570×750×515	220	1.4	50~200	<133	±0.5	±1%	75	
	DZF-6090S	485×440×425	620×780×600	220	2.4	50~200	<133	±0.5	±1%	112	

Características do produto

1. Estúdio Cubóide, controlador de temperatura de microcomputador, controle de temperatura preciso e confiável.
2. As portas de vidro duplo temperadas e à prova de balas proporcionam uma visão clara dos objetos do estúdio.
3. A estanqueidade da porta da caixa pode ser ajustada e a vedação da porta em borracha de silicone integralmente formada garante um alto vácuo dentro da caixa.
4. O estúdio é feito de chapa de aço inoxidável (ou chapa escovada) para garantir a durabilidade do produto.
5. O armazenamento, o aquecimento, os testes e a secagem são realizados em um ambiente sem oxigênio ou preenchido com gás inerte, portanto não haverá oxidação.
6. O menor tempo de aquecimento, o tempo de aquecimento é reduzido em mais de 50% em comparação com o forno de secagem a vácuo tradicional | forno a vácuo.

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.