

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



破碎シリーズ

実験用ジョークラッシャー

EP

実験用小型ジョークラッシャーは、粒度30mm以下の鉱石や脆性材料の粗砕・細砕が可能。出料粒度を調整でき、実験室での破碎作業に最適です。


<https://www.labballmill.com/ja/products/broken-series/lab-jaw-crusher.html>


Generated at 2026-07-28 15:52:54



製品概要




実験用小型ジョークラッシャーは、粒度30mm以下の鉱石や脆性材料の粗砕・細砕が可能。出料粒度を調整でき、実験室での破碎作業に最適です。

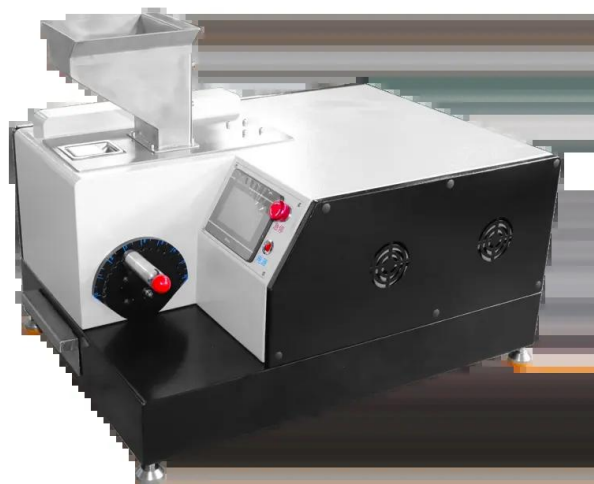

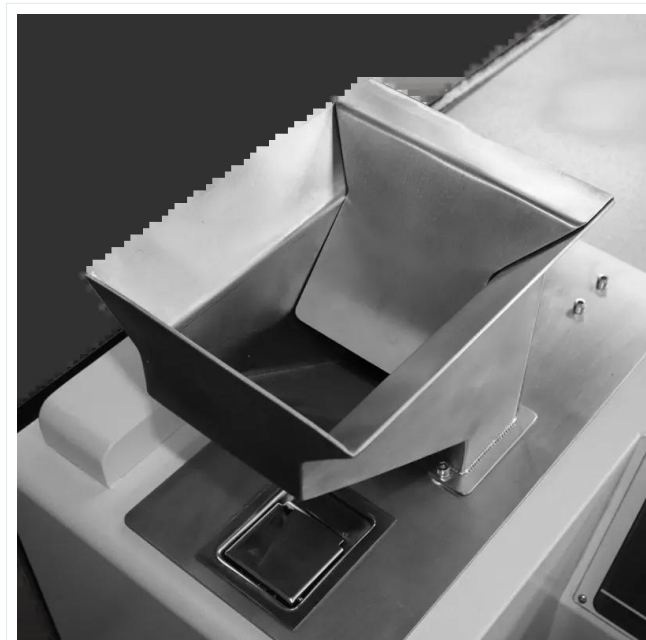

製品紹介

ジョークラッシャー（ジョークラッシャーと呼ばれます）は、主にさまざまな鉱石やバルク材料の中規模の破碎に使用されます。圧縮強度**320Mpa**以下の材料を粉碎することができます。粗粉碎と細粉碎の2種類に分かれます□ **PE シリーズジョークラッシャー**は完全な仕様を備えており、供給粒径は **125mm □ 1200mm** の範囲です。一次粉碎装置です。この装置は主に、石灰石、炭化カルシウム、炭化カルシウムスラグ、頁岩、玄武岩、川砂利、青石などのさまざまな鉱石の粗、中、微粉碎に使用されます。セメント工場、砂および砂利工場、石材工場、火力発電所の脱硫および炭化カルシウム工場うまく機能します。鉱業、冶金、化学工業、建材、水利、輸送、その他の産業で広く使用されています。

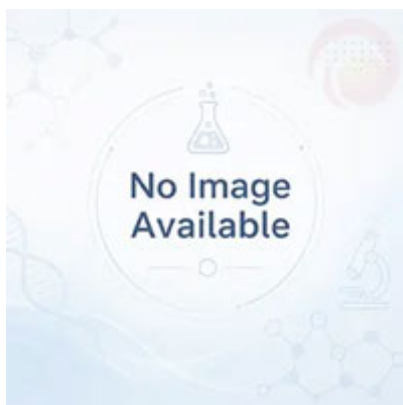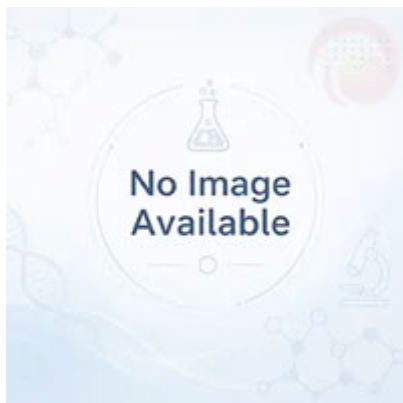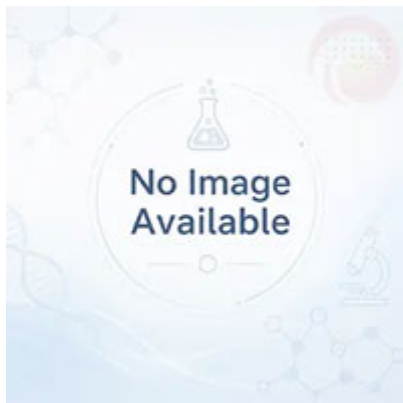


この装置は、主に石灰石、炭化カルシウム、炭化カルシウムスラグ、頁岩、玄武岩、川砂利、青石などのさまざまな鉱石の微粉碎に使用されます。大学、科学研究機関、工場、鉱山研究室で優れた実績があり、鉱業、冶金、化学工業、建材、水利、運輸、新エネルギーなどの産業で広く使用されています。

技術的パラメータ

製品名	全体の寸法	重さ	モーター出力	スピード	顎の移動速度	供給粒子径	放電粒子径
ジョークラッシャー	730x510x570mm	115kg	0.75Kw / 220V	1400rpm	560rpm	<35mm	≤8mm粒度調整可能

動作原理

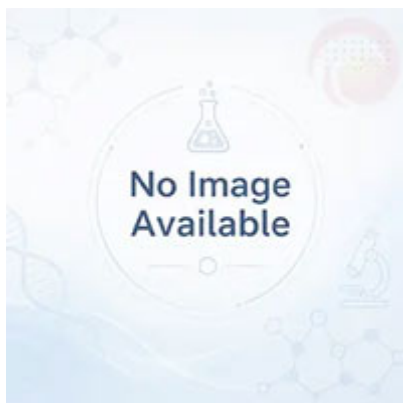

アクセサリーとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。