

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



صندوق القفازات

صندوق القفازات الأكريليكي

GBT

شفاف بالكامل ومناسب للصناعات البيوكيميائية والصيدلانية


<https://www.labballmill.com/ar/products/glove-box/acrylic-glove-box.html>




Generated at 2026-07-28 14:48:54



نظرة عامة على المنتج

شفاف بالكامل ومناسب للصناعات البيوكيميائية والصيدلانية

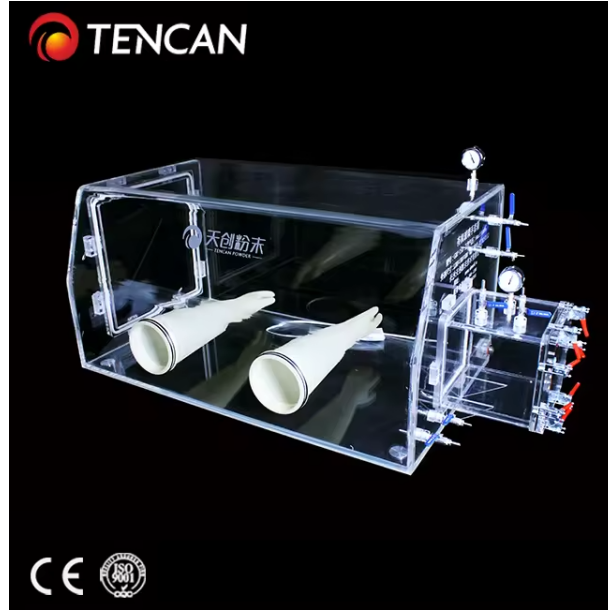

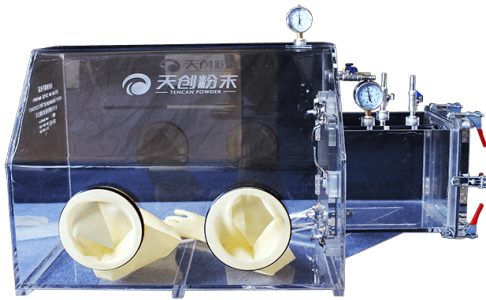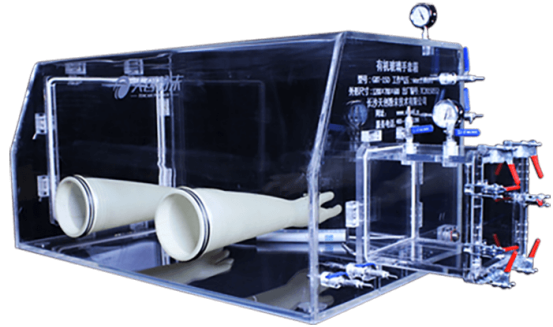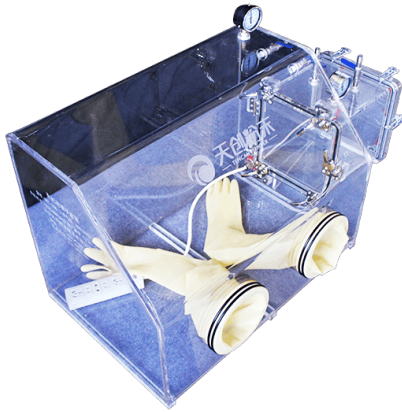

مقدمة المنتج

المعلومات التقنية

نموذج صندوق القفازات الزجاجي

وصف رقم صندوق القفازات

(جي بي تي رمز المنتج (صندوق القفازات الشفاف

(سمك المادة (اختياري 10 --- 30 مم 10

(الأبعاد والنماذج (النوع أ، النوع ب، النوع ج، النوع د A

ملاحظة	أبعاد الغرفة الانتقالية	سمك الخزانة ((مم	مادة	(حجم الصندوق (مم	نموذج المنتج
معزولة ومقاومة للغبار، ولا تستخدم المكنسة الكهربائية	لا أحد	10	زجاج شبكي أو أكربليك	700×450×500	GBT-10A
يمكن تجهيز الفراغ الصغير بنظام تنقية إزالة الماء والأكسجين	240×240×240	15			GBT-15A
استبدال الأكسجين والماء، MPA، فراغ إلى -0.1		30			GBT-30A
معزولة ومقاومة للغبار، ولا تستخدم المكنسة الكهربائية	لا أحد	10	زجاج شبكي أو أكربليك	1000×500×500	GBT-10B
يمكن تجهيز الفراغ الصغير بنظام تنقية إزالة الماء والأكسجين	240×240×240	15			GBT-15B
استبدال الأكسجين والماء، MPA، فراغ إلى -0.1		30			GBT-30B
معزولة ومقاومة للغبار، ولا تستخدم المكنسة الكهربائية	لا أحد	10	زجاج شبكي أو أكربليك	1200×600×600	GBT-10C
يمكن تجهيز الفراغ الصغير بنظام تنقية إزالة الماء والأكسجين	240×240×240	15			GBT-15C
استبدال الأكسجين والماء، MPA، فراغ إلى -0.1		35			GBT-30C
معزولة ومقاومة للغبار، ولا تستخدم المكنسة الكهربائية	لا أحد	10	زجاج شبكي أو أكربليك	1200×800×700	GBT-10D
يمكن تجهيز الفراغ الصغير بنظام تنقية إزالة الماء والأكسجين	240×240×240	15			GBT-15D
استبدال الأكسجين والماء، MPA، فراغ إلى -0.1		35			GBT-30D

التخصيص الخاص



مادة




مقاس





شكل






متطلبات التخصيص الأخرى

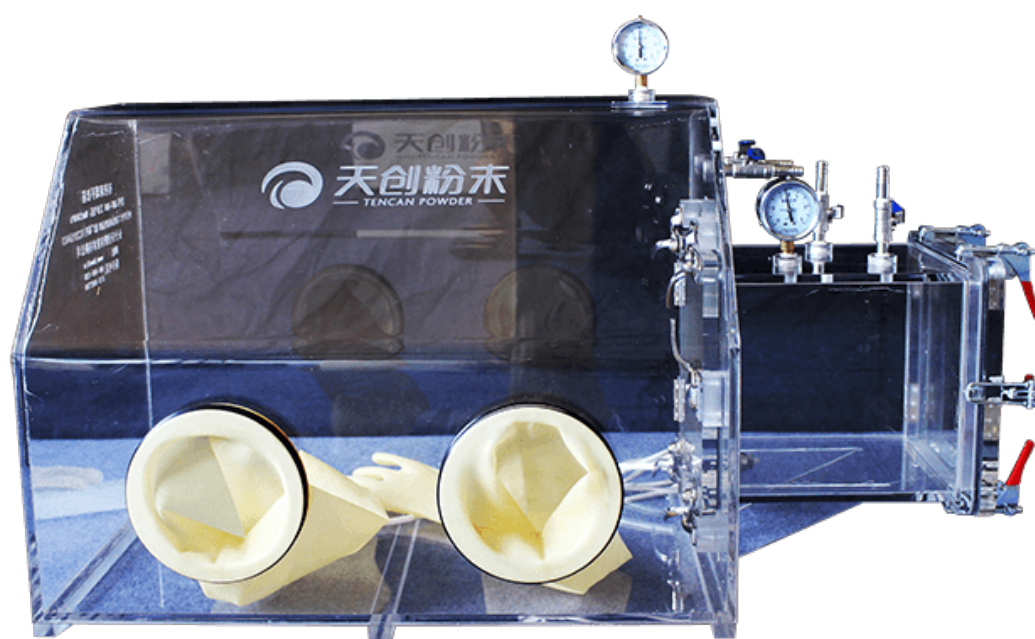

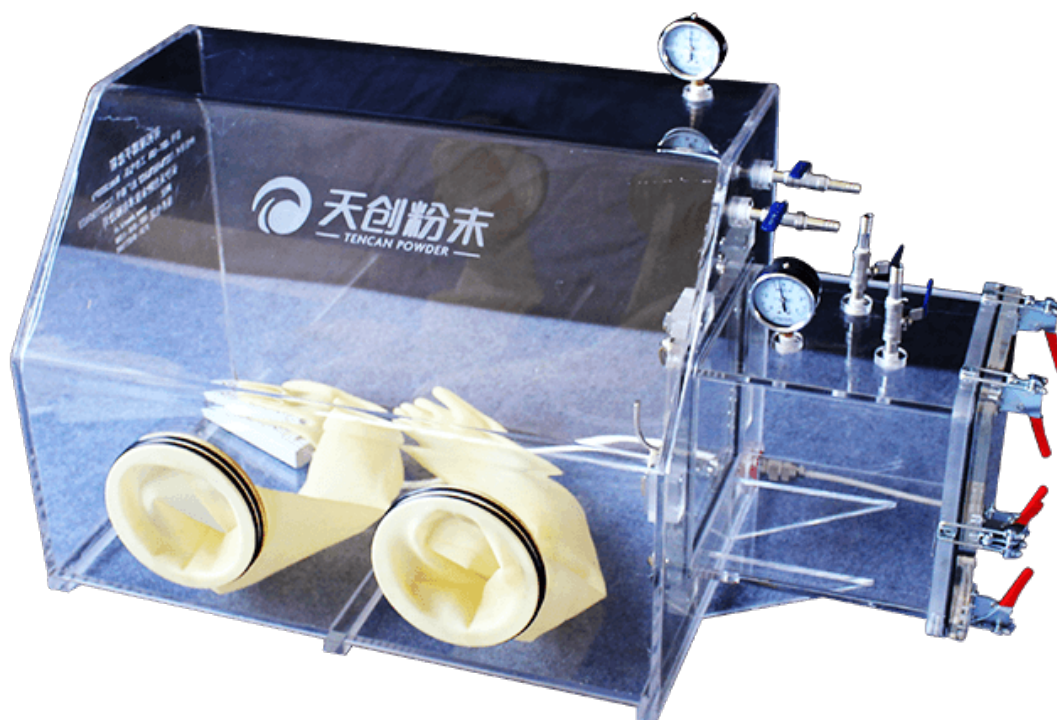

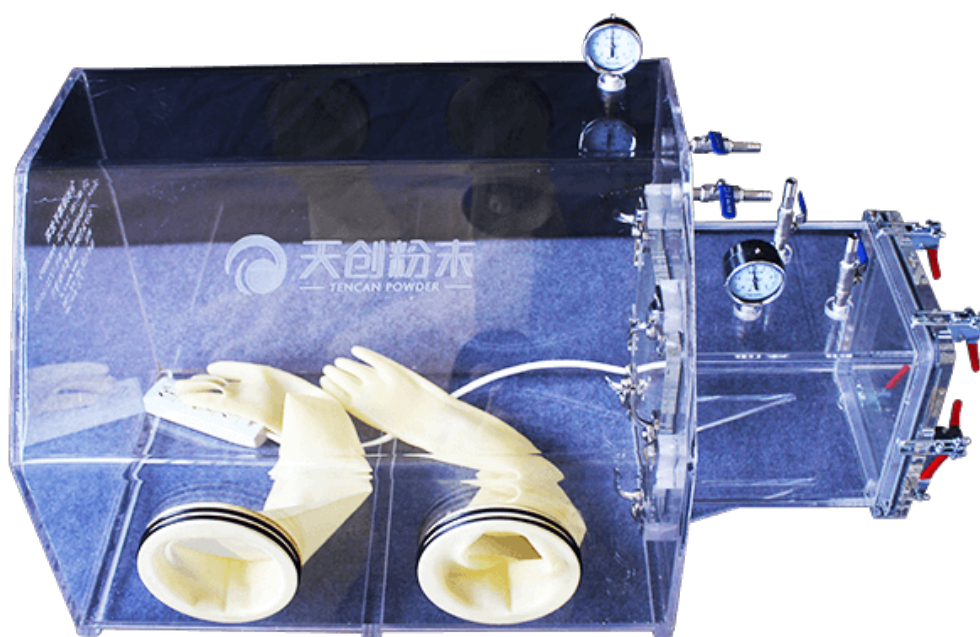

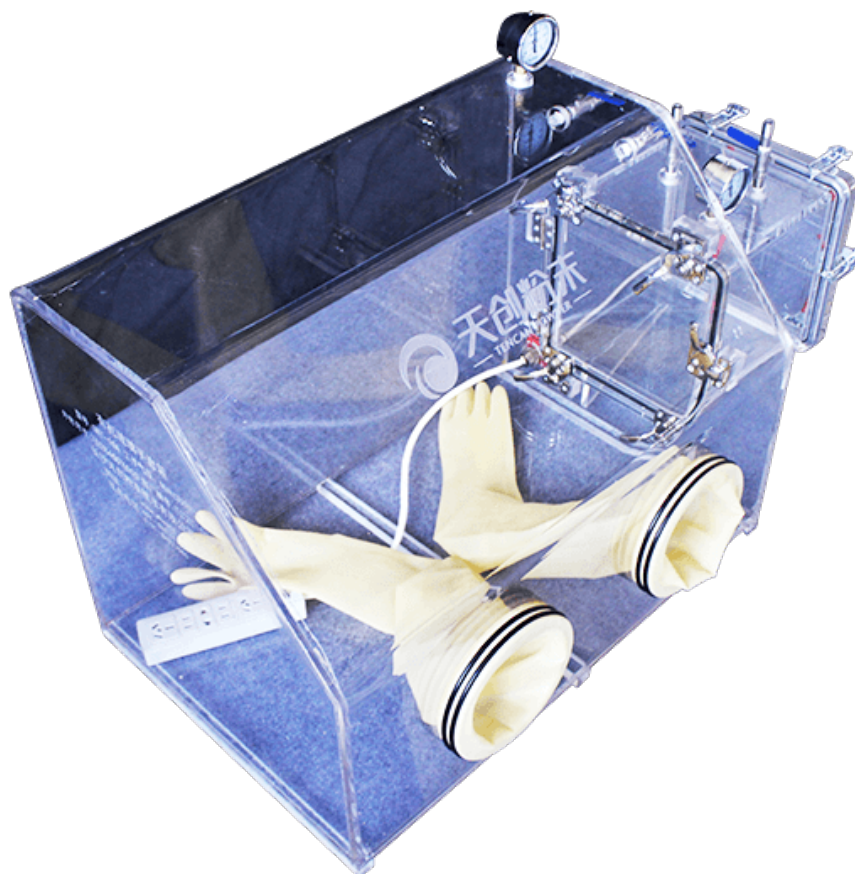

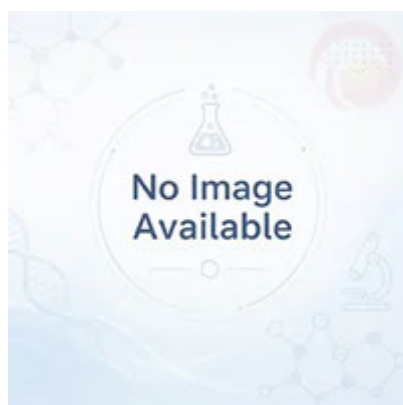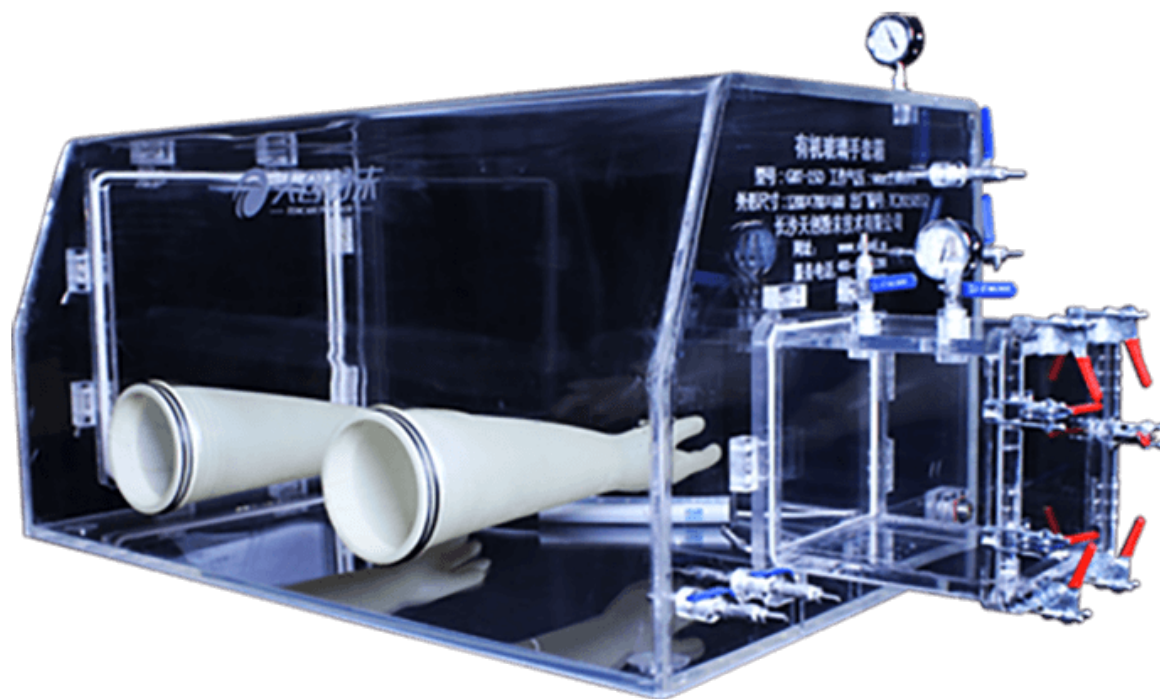



مبدأ العمل

أثناء التجارب العلمية، تتأكسد بعض المواد وتذوب بسهولة في الجو، مما يجعل التفاعل الكيميائي لمادة الاختبار والمعالجة المسبقة للعينة صعباً للغاية، مما يؤثر على عملية الاختبار ونتائج الاختبار. يعمل صندوق القفازات الفراغي الزجاجي (المعروف أيضاً باسم صندوق تشغيل الغاز الخامل الفراغي) على حل هذه المشكلات بشكل فعال. يسمح هذا الجهاز بإدخال عينات الاختبار وإخراجها بأمان، ويمكن تشغيله وتفاعله واختباره بحرية في حالة خالية من الأكسجين والماء، مما يضمن السير الطبيعي للتجارب العلمية.



ميزات المنتج

- 01 إنه ذو هيكل بسيط، سهل الاستخدام، يمكنه نقل الأشعة فوق البنفسجية، وخفيف الوزن
- 02 في ظل الظروف العادية، يكون شكله مستقراً وشفافاً للغاية ومقاوماً للتآكل الكيميائي وتغير المناخ
- 03 الصندوق مزود بمقاييس كهربائية متعددة الفتحات لتسهيل إجراء التجارب العلمية
- 04 إنه يتمتع بأداء إغلاق جيد ويمكنه حماية وامتصاص أشعة ألفا وأشعة بيتا منخفضة الطاقة المنبعثة من المواد المشعة لحماية الأنسجة البشرية من التلف الناتج عن الإشعاع المؤين. لذلك، يمكنها التعاون مع وحدات البحث العلمي في إجراء الأعمال التجريبية على المواد المشعة منخفضة الطاقة، وعمليات التعقيم على التلقيح الميكروبي، والتحليل النوعي والكمي للمواد الكيميائية، وعمليات العزل المغلقة الأخرى ذات الصلة، والتي يمكن إجراؤها جميعاً في صندوق التشغيل.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وجوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.