

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



سلسلة مطاحن الكرة الدوارة

مطحنة كروية غربلة

MS

مطحنة كروية غربلة تدمج الطحن والغربلة في عملية واحدة. تتكون من أسطوانة طحن ونظام غربلة وتغذية وتجميع. طحن وغربلة مستمرة مع تغذية تلقائية وفصل دقيق.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/drum-ball-mill/screening-ball-mill.html>

Generated at 2026-07-28 15:54:32



نظرة عامة على المنتج


مطحنة كروية غربلة تدمج الطحن والغربلة في عملية واحدة. تتكون من أسطوانة طحن ونظام غربلة وتغذية وتجميع. طحن وغربلة مستمرة مع تغذية تلقائية وفصل دقيق.





مقدمة المنتج

مطحنة الغريلة (مطحنة الغريلة) إنها تتكون من أسطوانة مطحنة كروية، نظام غريلة، نظام تغذية، ونظام تجميع. يمكن سحق المواد وغريلتها أثناء عملية طحن الكرة. بعد أن تصل المادة إلى حجم الجسيمات، يتم غريلتها بواسطة نظام الغريلة. يتم جمع المواد التي تم فحصها بواسطة نظام التجميع، ويتم تغذية المواد بشكل مستمر من خلال نظام التغذية. بالنسبة للمواد، فإن آلة الطحن والغريلة مناسبة بشكل خاص للمواد التي تحتاج إلى سحقها إلى حجم جسيم معين. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على نطاق معين، مثل 200-300 مادة شبكية، فإن آلة الطحن والغريلة مناسبة جداً. بالإضافة إلى ذلك، فإن آلة الطحن والغريلة تعمل أيضاً على تحسين كفاءة الطحن بشكل كبير وتقليل طحن الكرات المتكرر غير الضروري.

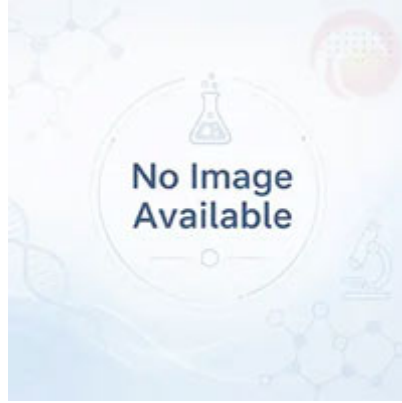

مطحنة الغريلة (مطحنة الغريلة) بشكل عام، يتم تخصيصه وفقاً لمتطلبات العميل، ويقدم العميل نطاق حجم جزيئات التكسير وحجم صندوق التكسير ومواد صندوق التكسير التي تتطلبها آلة الطحن والغريلة.



المعلومات التقنية

نموذج	سرعة تحويل التردد (ص/دقيقة) $3\pm$	المحرك (كيلوواط)	سلسلة المحرك	الجهد الكهربائي	سعة التحميل L	منفذ التفريغ بعيد عن الأرض	وزن المعدات	حجم برمبل مطحنة	الأبعاد الكلية (الأبعاد المرجعية) مم
MS-30	10-72	1.5	4	مرحلة واحدة 220 فولت	10	480mm	حوالي 290 كجم	$\Phi 320 \times 420 \times 5 \text{mm}$	1690x650x1360
MS-60	10-68	2.2		ثلاث مراحل 380 فولت	20	580mm	حوالي 350 كجم	$\Phi 382 \times 580 \times 6 \text{mm}$	1856x700x1500
MS-100	10-58	3		ثلاث مراحل 380 فولت	33	530mm	حوالي 445 كجم	$\Phi 455 \times 610 \times 8 \text{mm}$	1910x700x1500
MS-200	10-58	5.5		380V	66	~	~	~	2200x820x1600 حوالي

مبدأ العمل

مطحنة الغريلة (مطحنة الغريلة) عند العمل، يتم رفع وسائط ومواد الطحن الموجودة في الأسطوانة إلى ارتفاع معين مع دوران الأسطوانة. بسبب تأثير الجاذبية، تنفصل عن جدار الأسطوانة وتسقط على طول القطع المكافئ. يتم سحق المواد تحت تأثير وسائط الطحن والاحتكاك والقص الناتج عن تدحرج وانزلاق وسائط الطحن. يمكن استخدام آلات الطحن والغريلة على نطاق واسع في المواد الإلكترونية والمواد المغناطيسية والطب الحيوي وملاط طلاء السيراميك والمعادن غير المعدنية والمواد الجديدة وغيرها من الصناعات.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وجوهر العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.