

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



СТАКАНЫ ДЛЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Вакуумная планетарная шаровая банка

Вакуумная планетарная шаровая банка предотвращает окисление. Вакуумируется и заполняется инертным газом.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/vacuum-planetary-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:33:21



Обзор продукта

Вакуумная планетарная шаровая банка предотвращает окисление. Вакуумируется и заполняется инертным газом.






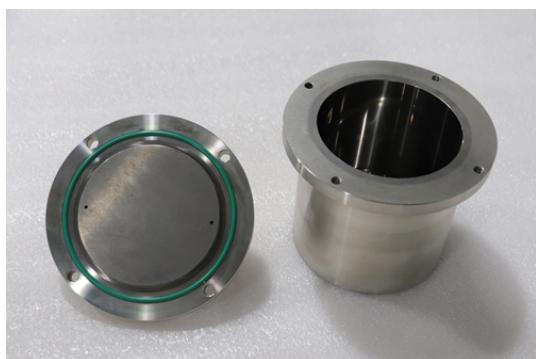


Описание продукта

Резервуар планетарной вакуумной шаровой мельницы в основном разработан для решения проблемы окисления материалов кислородом воздуха во время процесса измельчения планетарной шаровой мельницы. Благодаря специальной конструкции уплотнения резервуара для измельчения его можно откачать, а затем заполнить инертным газом, чтобы изолировать материал от кислорода, воды или других веществ в воздухе, которые могут повлиять на измельчение, тем самым избегая окисления и уменьшая контакт между материалом и другими веществами, влияющими на эффект измельчения.

Различные размеры могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента.

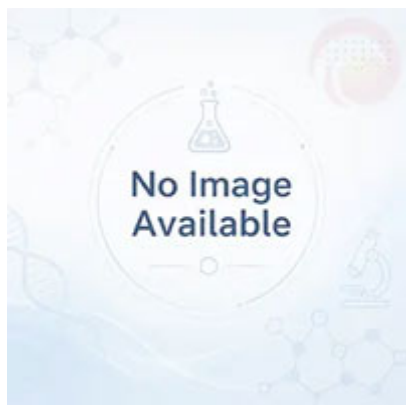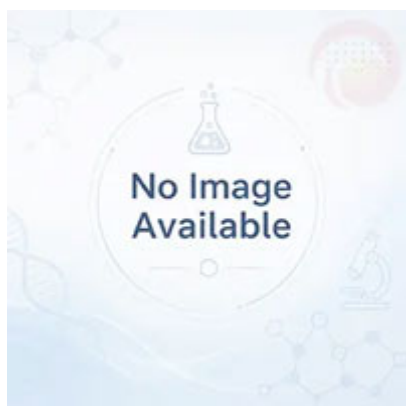

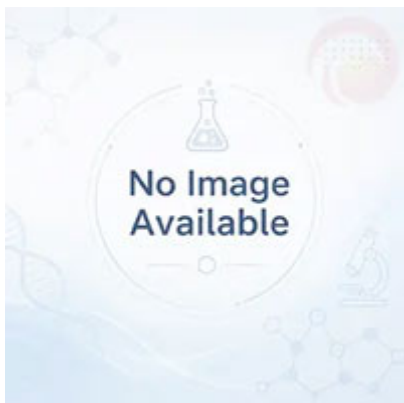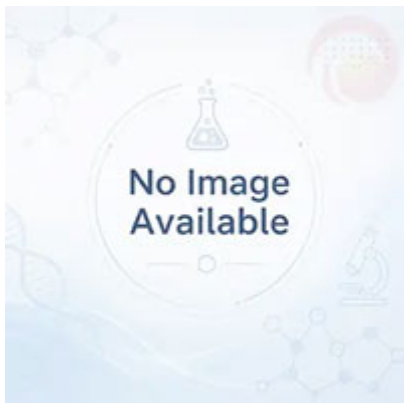

Технические параметры

Технические характеристики модели	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Край фланца (мм)	Внутренняя глубина (мм)	Без учета высоты крышки (мм)	Высота, включая крышку (мм)	Справочная масса (кг)
50ML	39	49	78	45	50	58	0.7
100ML	48	62	88	57	65	72	1.3
250ML	73	88	108	65	73	80	2.1
500ML	90	107	132	93	100	107	3.5
1L	106	121	131	117	123	130	4.2
1.5L	115	131	151	143	150	158	5.8
2L	141	153	177	133	140	149	6.3
3L	141	157	178	198	205	213	9.2
4L	168	178	220	200	205	213	9.2
5L	182	192	234	200	205	213	10.2

Особенности продукта

1. Специальная конструкция клапана, простота в эксплуатации и прочное уплотнение.;
2. Изготовлен из нержавеющей стали, его также можно облицовывать нейлоном, полиуретаном, корундом и другими материалами, что обеспечивает высокую универсальность. ;
3. Tianchuang профессионально разрабатывает, продает напрямую от производителя и экономически эффективен.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.