

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIỆN BI HÀNH TINH

Lọ nghiền hành tinh chân không

Lọ nghiền hành tinh chân không chống oxy hóa, thiết kế kín khí cho phép hút chân không và nạp khí trơ, bảo vệ vật liệu khỏi oxy và ẩm trong quá trình nghiền.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/vacuum-planetary-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:33:38



Tổng quan sản phẩm

Lọ nghiền hành tinh chân không chống oxy hóa, thiết kế kín khí cho phép hút chân không và nạp khí trơ, bảo vệ vật liệu khỏi oxy và ẩm trong quá trình nghiền.






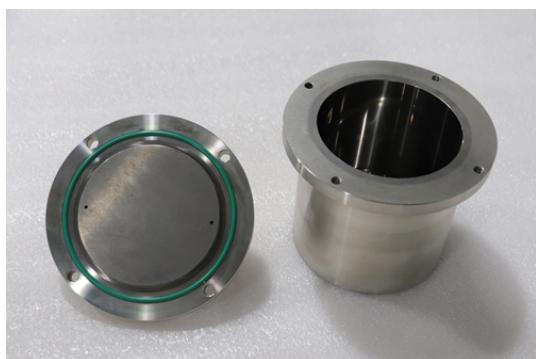


Giới thiệu sản phẩm

Bể chứa máy nghiền bi chân không hành tinh chủ yếu được phát triển để giải quyết vấn đề vật liệu sẽ bị oxy hóa bởi oxy trong không khí trong quá trình nghiền của máy nghiền bi hành tinh. Thông qua thiết kế bịt kín đặc biệt của thùng nghiền, nó có thể được sơ tán và sau đó đổ đầy khí trơ để cách ly vật liệu khỏi oxy, nước hoặc các chất khác trong không khí có thể ảnh hưởng đến quá trình nghiền, từ đó tránh được quá trình oxy hóa và giảm tiếp xúc giữa vật liệu và các chất khác ảnh hưởng đến hiệu quả nghiền.

Kích cỡ khác nhau có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

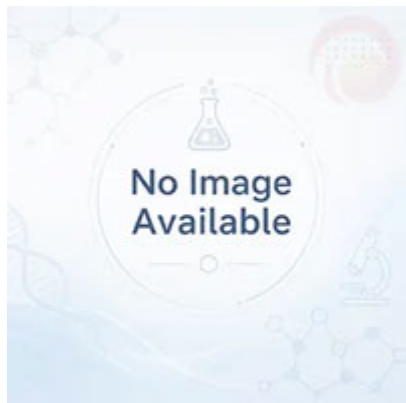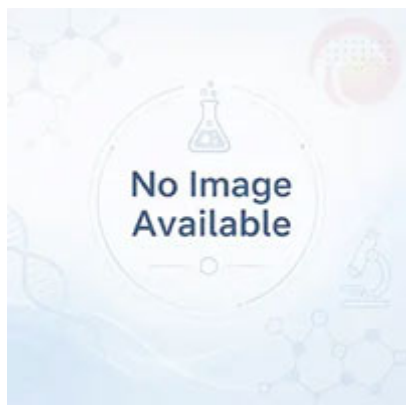

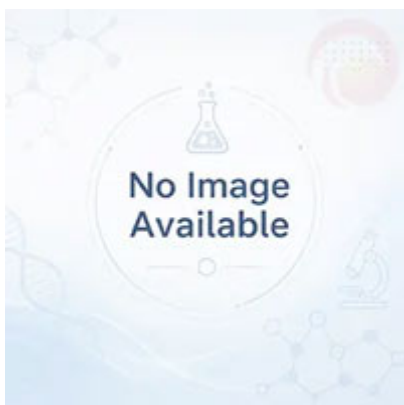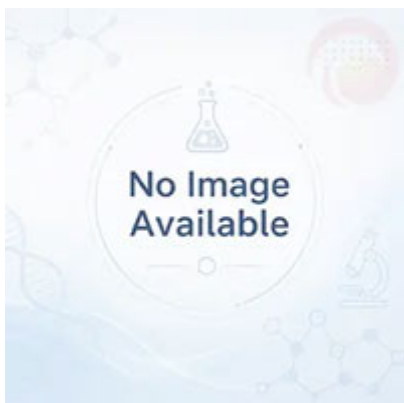

Thông số kỹ thuật

Thông số mẫu	Đường kính trong (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Cạnh mặt bích (mm)	Độ sâu bên trong (mm)	Không bao gồm chiều cao bìa (mm)	Chiều cao bao gồm cả nắp (mm)	Trọng lượng tham khảo (kg)
50ML	39	49	78	45	50	58	0.7
100ML	48	62	88	57	65	72	1.3
250ML	73	88	108	65	73	80	2.1
500ML	90	107	132	93	100	107	3.5
1L	106	121	131	117	123	130	4.2
1.5L	115	131	151	143	150	158	5.8
2L	141	153	177	133	140	149	6.3
3L	141	157	178	198	205	213	9.2
4L	168	178	220	200	205	213	9.2
5L	182	192	234	200	205	213	10.2

Tính năng sản phẩm

- Thiết kế van đặc biệt, vận hành dễ dàng và bịt kín chắc chắn;
- Được làm bằng thép không gỉ, nó cũng có thể được lót bằng nylon, polyurethane, corundum và các vật liệu khác, với tính linh hoạt mạnh mẽ ;
- Tianchuang phát triển chuyên nghiệp, bán trực tiếp từ nhà sản xuất và tiết kiệm chi phí.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.