

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



جراة مطحنة الكرة الكوكبية

جراة الطحن الكوكبية المفرغة

جراة الطحن الكوكبية المفرغة تمنع أكسدة المواد أثناء الطحن عبر إغلاق محكم، تفريغ الهواء، وملء غاز خامل لعزل المواد عن الأكسجين والرطوبة.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/vacuum-planetary-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:33:50



نظرة عامة على المنتج

جرة الطحن الكوكبية المفرغة تمنع أكسدة المواد أثناء الطحن عبر إغلاق محكم، تفريغ الهواء، وملء غاز خامل لعزل المواد عن الأكسجين والرطوبة.




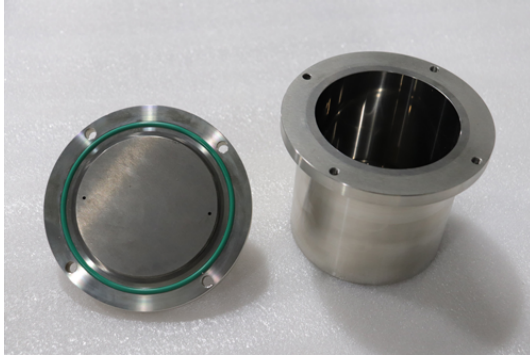


مقدمة المنتج

تم تطوير خزان طاحونة الكرات الكوكبية بشكل أساسي لمعالجة مشكلة أكسدة المواد بواسطة الأكسجين الموجود في الهواء أثناء عملية الطحن في طاحونة الكرات الكوكبية. من خلال تصميم الختم الخاص لخزان الطحن، يمكن تفريغه ومن ثم تعبئته بالغاز الخامل لعزل المادة عن الأكسجين أو الماء أو المواد الأخرى الموجودة في الهواء والتي قد تؤثر على الطحن، وبالتالي تجنب الأكسدة وتقليل الاتصال بين المادة والمواد الأخرى التي تؤثر على تأثير الطحن.

يمكن تخصيص أحجام مختلفة وفقاً لاحتياجات العملاء.



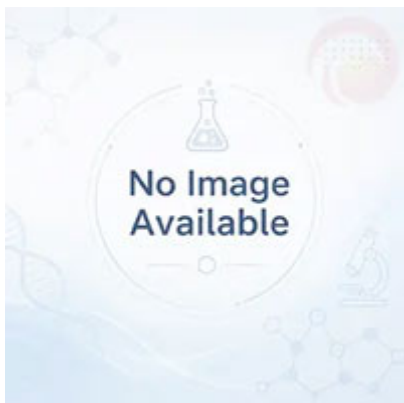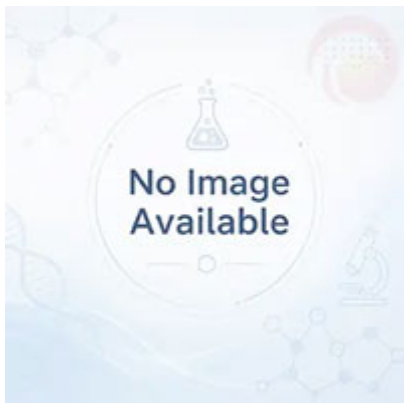

المعلومات التقنية

الوزن المرجعي (كجم)	الارتفاع شاملاً الغطاء (مم)	باستثناء ارتفاع الغطاء (مم)	(العمق الداخلي (مم)	(حافة شفة (مم)	(القطر الخارجي (مم)	(القطر الداخلي (مم)	مواصفات النموذج
0.7	58	50	45	78	49	39	50ML
1.3	72	65	57	88	62	48	100ML
2.1	80	73	65	108	88	73	250ML
3.5	107	100	93	132	107	90	500ML
4.2	130	123	117	131	121	106	1L
5.8	158	150	143	151	131	115	1.5L
6.3	149	140	133	177	153	141	2L
9.2	213	205	198	178	157	141	3L
9.2	213	205	200	220	178	168	4L
10.2	213	205	200	234	192	182	5L

مميزات المنتج

1. تصميم صمام خاص، عملية سهلة وختم قوي؛
2. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن أيضاً تبطينها بالنايلون والبولي يوريثين والكوراندوم وغيرها من المواد، مع تنوع قوي؛
3. Tianchuang. تقوم شركة بالتطوير الاحترافي والبيع مباشرة من الشركة المصنعة، كما أنها فعالة من حيث التكلفة

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وجوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.