

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



СЕРИЯ ПЕЧЕЙ ДЛЯ СПЕКАНИЯ

Спекательная печь T-Bright Plus

TC-BPSF

Печь T-Bright Plus: точный контроль, быстрое спекание, 150 зубов, японская печь, без загрязнений.

<https://www.labballmill.com/ru/products/sintering-series/t-bright-plus-sintering-furnace.html>

Generated at 2026-07-28 16:02:06




TENCAN

Обзор продукта

Печь T-Bright Plus: точный контроль, быстрое спекание, 150 зубов, японская печь, без загрязнений.



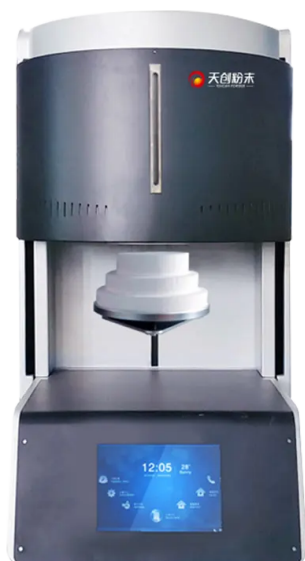

Описание продукта

Печь для спекания циркония Tianchuang Plus представляет собой модернизированную модель обычной печи для спекания Tianchuang. Он имеет характеристики точного контроля температуры, запуска одной кнопкой и быстрого спекания.; Одновременно можно спекать до 150 зубов и размещать 3 слоя тиглей. ; И он использует печь, импортированную из Японии, которая является чистой и не загрязняет окружающую среду.

Печь для спекания Tianchuang PLUS — это оборудование для термообработки, специально используемое для спекания стоматологической керамики. Эта печь имеет специальную конструкцию и систему управления для спекания стоматологической керамики в определенных условиях температуры и атмосферы, чтобы обеспечить необходимую твердость, износостойкость и эстетику. Стоматологические печи для спекания обычно имеют функции точного контроля температуры и управления атмосферой для удовлетворения требований процесса спекания стоматологической керамики.

Технические параметры

Размер печи	100*100 мм (диаметр*высота)
максимальная температура	1700°C (не более 2 часов)
рабочая температура	1600°C
Система управления	Запуск одним щелчком мыши, полностью автоматическая гарантия отсутствия загрязнения, конструкция предварительного обжига короны, циркуляционный воздухозаборник, импортный нагревательный стержень, полностью решают проблему загрязнения.
встроенные программы	7 предустановленных программ (нормальная, длинная перемычка, половина рта, быстрое прожигание, шпон ТТ, шпон УТ, чистка)
Материал печи	Печь импортирована из Японии, очень длительный срок службы.
Быстрое спекание	90 минут (80 единиц на корону)
Традиционное спекание	150 шт., 3-слойный лоток для спекания
Термопара	Тип Б
Точность контроля температуры	+/-1 °C
Номинальная мощность	2 кВт (на одно обычное спекание требуется всего 8 киловатт-часов)
вес нетто	90kgs
Габаритные размеры	480X635X840MM

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.