

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



معدات البحث العلمي

مطحنة أنسجة محمولة

ZZYM

مطحنة أنسجة محمولة لطحن الشعر والبلغم والنباتات والأغذية والميكروبات وجميع أنواع الأنسجة بسهولة وفعالية.

<https://www.labballmill.com/ar/products/research-equipment/portable-tissue-grinder.html>

Generated at 2026-07-28 14:57:38






نظرة عامة على المنتج

مطحنة أنسجة محمولة لطحن الشعر والبلغم والنباتات والأغذية والميكروبات وجميع أنواع الأنسجة بسهولة وفعالية.



مقدمة المنتج

تقوم مطحنة الأنسجة المحمولة بحركة ثلاثية الأبعاد في الاتجاه الأفقي لطحن العينة. إن القصور الذاتي لكرات/خرزات الطحن يدفعها إلى التأثير على مادة العينة الموجودة على السطح الداخلي على شكل قوس بطاقة عالية، وبالتالي تحقيق تأثير التكسير والطحن. يمكن فرض حركة المحول مع حركة الكرة الداخلية لخلط العينة تمامًا.

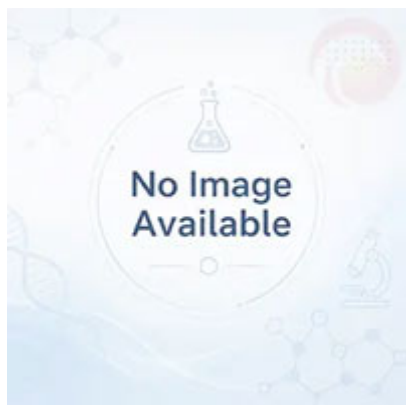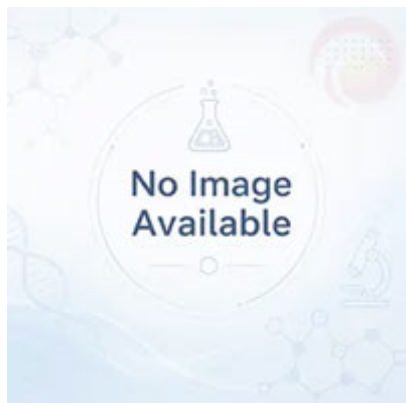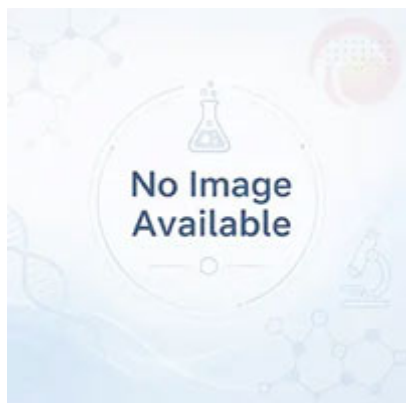



إنها مناسبة لطحن الأنسجة المختلفة مثل الشعر والبلغم والنباتات والمواد الغذائية والكائنات الحية الدقيقة.

المعلومات التقنية

نموذج	ZZYM-06
الإنتاجية	مل * 2/2 مل * 4/2 مل * 5 6
جهد الإمداد	DC12V
سعة البطارية	6000mAh
وقت الطحن	قابل للتعديل بشكل تعسفي 1-9999S
الحماية الأمنية	قفل أمان العمل
مستوى الضوضاء	ديسيبل <54
مبدأ العمل	استخدم وضع الحركة ثلاثي الأبعاد لطحن العينات
مقاس	ملم 210*140*150
وزن	2Kg

مميزات المنتج

1. تصميم محمول، حجم صغير وخفيف الوزن، سهل الحمل.
2. إنتاجية عالية، تأثير جيد، سريع ودقيق.
3. التحريك القوي للتحلل أو الطحن أو التجانس.
4. التشغيل البسيط والتصميم الآمن يضمن التشغيل الآمن.
5. محول الطاقة المحمول المحمول، يمكن استخدامه في أي وقت وفي أي مكان.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.