

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Trituradora de tejidos portátil

ZZYM

Trituradora de tejidos portátil para moler cabello, esputo, plantas, alimentos y microorganismos. Laboratorio.

<https://www.labballmill.com/es/products/research-equipment/portable-tissue-grinder.html>


Generated at 2026-07-28 14:57:23



TENCAN




Descripción general del producto

Trituradora de tejidos portátil para moler cabello, esputo, plantas, alimentos y microorganismos. Laboratorio.

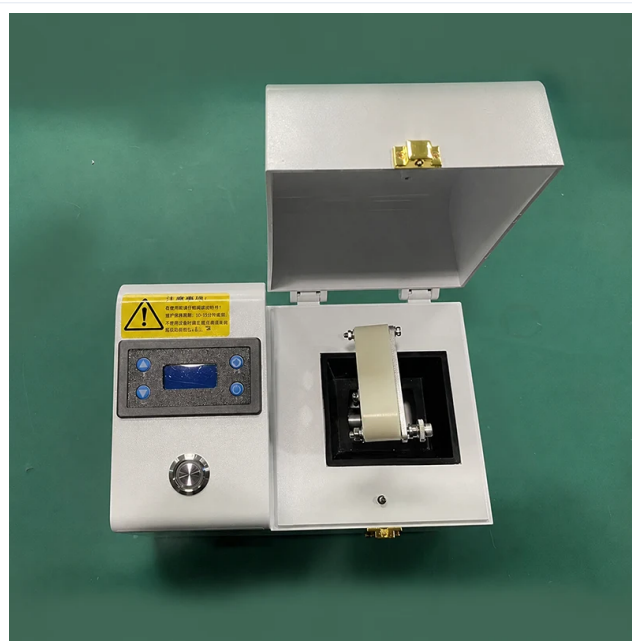

Introducción del producto

El triturador de tejidos portátil realiza un movimiento tridimensional en dirección horizontal para triturar la muestra. La inercia de las bolas/cuentas de molienda las impulsa a impactar el material de muestra ubicado en la superficie interna en forma de arco con alta energía, logrando así el efecto de trituración y molienda. El movimiento del adaptador se puede superponer al movimiento de la bola interna para mezclar completamente la muestra.

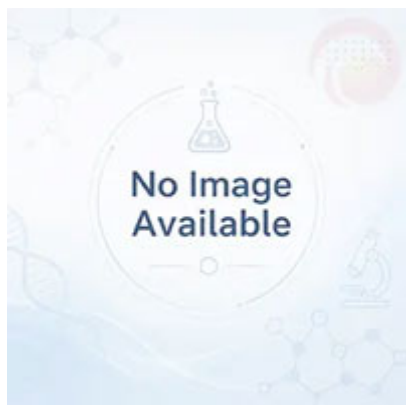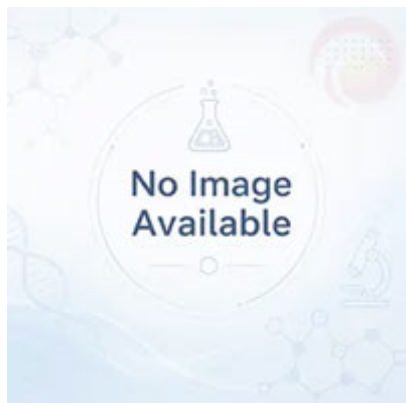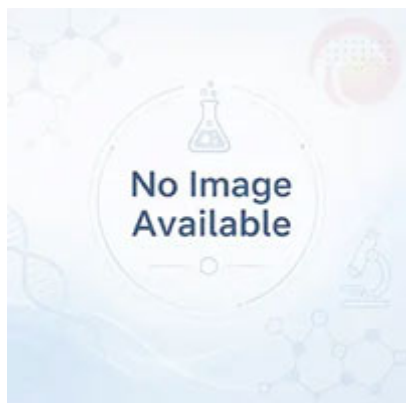



Es adecuado para triturar diversos tejidos como cabello, esputo, plantas, alimentos y microorganismos.

Parámetros técnicos

modelo	ZZYM-06
Rendimiento	5ml*2/2ml*4/2ml*6
Tensión de alimentación	DC12V
Capacidad de la batería	6000mAh
tiempo de molienda	1-9999S arbitrariamente ajustable
Protección de seguridad	cerradura de seguridad laboral
Nivel de ruido	<54dB
Principio de funcionamiento	Utilice el modo de movimiento 3D para moler muestras
tamaño	210*140*150 milímetros
peso	2Kg

Características del producto

1. Diseño portátil, tamaño pequeño y peso ligero, fácil de llevar.
2. Alto rendimiento, buen efecto, rápido y preciso.
3. Potente agitación para lisis, trituración u homogeneización.
4. El funcionamiento sencillo y el diseño seguro garantizan un funcionamiento seguro.
5. Adaptador de corriente móvil portátil, se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.