

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE

Broyeur de tissus portable

ZZYM

Broyeur de tissus portable pour échantillons variés : cheveux, crachats, plantes, aliments, microbes. Utilisation facile, idéal pour laboratoire.


<https://www.labballmill.com/fr/products/research-equipment/portable-tissue-grinder.html>

Generated at 2026-07-28 14:57:31






Présentation du produit

Broyeur de tissus portable pour échantillons variés : cheveux, crachats, plantes, aliments, microbes. Utilisation facile, idéal pour laboratoire.

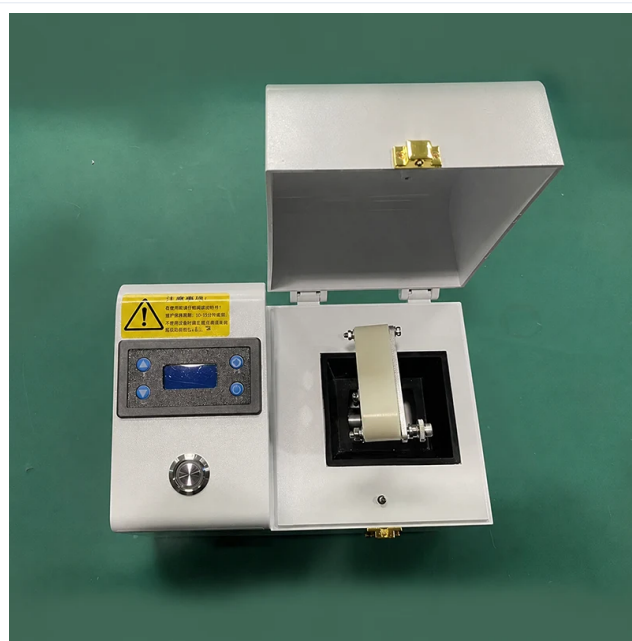

Présentation du produit

Le broyeur de tissus portable effectue un mouvement tridimensionnel dans le sens horizontal pour broyer l'échantillon. L'inertie des billes/billes de broyage les amène à impacter le matériau de l'échantillon situé sur la surface intérieure en forme d'arc avec une énergie élevée, obtenant ainsi l'effet de concassage et de broyage. Le mouvement de l'adaptateur peut être superposé au mouvement de la bille interne pour bien mélanger l'échantillon.

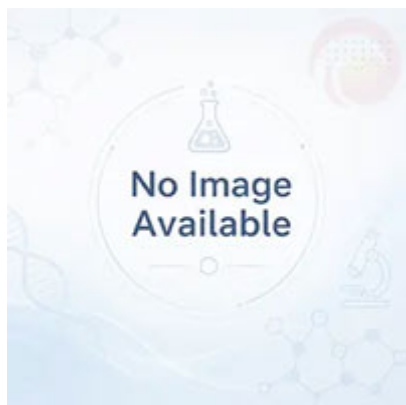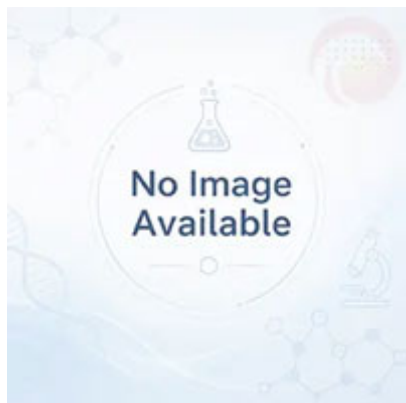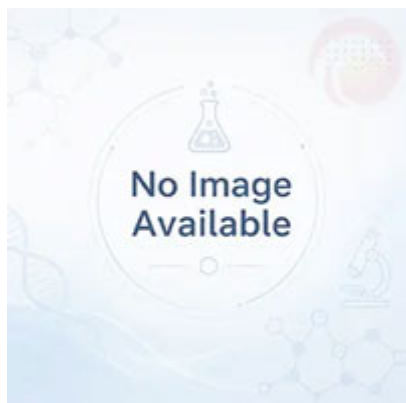



Il convient au broyage de divers tissus tels que les cheveux, les crachats, les plantes, les aliments et les micro-organismes.

Paramètres techniques

modèle	ZZYM-06
Débit	5ml*2/2ml*4/2ml*6
Tension d'alimentation	DC12V
Capacité de la batterie	6000mAh
Temps de broyage	1-9999S arbitrairement réglable
Protection de sécurité	serrure de sécurité au travail
Niveau de bruit	<54dB
Principe de fonctionnement	Utilisez le mode de mouvement 3D pour broyer des échantillons
taille	210*140*150 millimètres
poids	2Kg

Caractéristiques du produit

1. Conception portable, petite taille et poids léger, facile à transporter.
2. Débit élevé, bon effet, rapide et précis.
3. Agitation puissante pour la lyse, le broyage ou l'homogénéisation.
4. Un fonctionnement simple et une conception sûre garantissent un fonctionnement sûr.
5. L'adaptateur secteur mobile portable peut être utilisé à tout moment et n'importe où.

Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.