

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



研究機器

携帯型組織破碎機

ZZYM

毛髪、痰、植物、食品、微生物など多様な組織サンプルを効率的に破碎。携帯型で軽量、屋内外どこでも使用可能。迅速なサンプル調製を実現し、研究や検査に最適。フィールドワークにも対応。


<https://www.labballmill.com/ja/products/research-equipment/portable-tissue-grinder.html>

Generated at 2026-07-28 14:57:13






製品概要

毛髪、痰、植物、食品、微生物など多様な組織サンプルを効率的に破碎。携帯型で軽量、屋内外どこでも使用可能。迅速なサンプル調製を実現し、研究や検査に最適。フィールドワークにも対応。

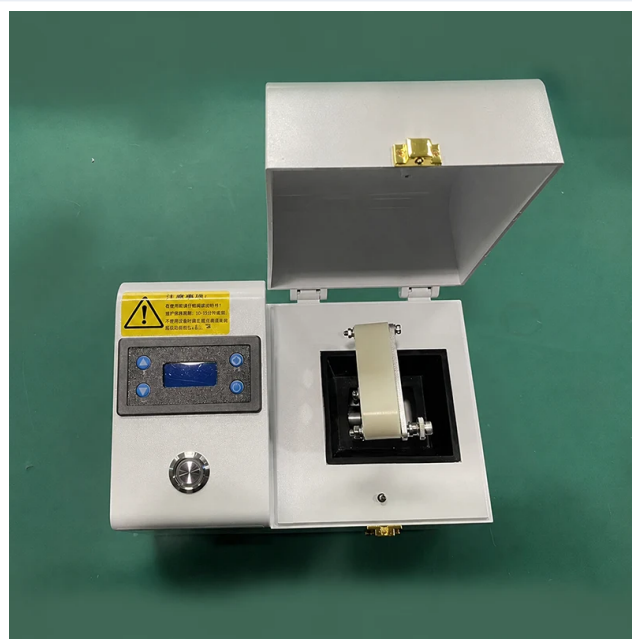

製品紹介

携帯型組織粉碎機は、水平方向に三次元移動してサンプルを粉碎します。粉碎ボール/ビーズの慣性により、円弧状の内面にあるサンプル材料に高エネルギーで衝撃を与え、粉碎および粉碎の効果が得られます。アダプターの動きと内部のボールの動きを重ね合わせることで、サンプルを徹底的に混合することができます。

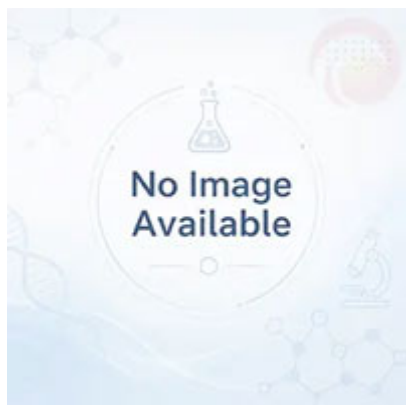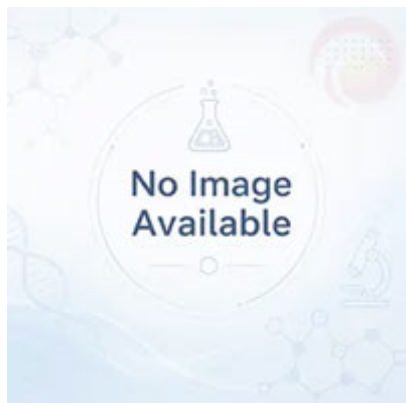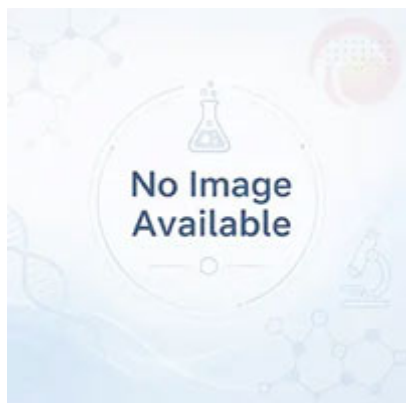



毛髪、痰、植物、食品、微生物など様々な組織の粉碎に適しています。

技術的パラメータ

モデル	ZZYM-06
スループット	5ml*2/2ml*4/2ml*6
電源電圧	DC12V
バッテリー容量	6000mAh
研削時間	1-9999S 任意に調整可能
セキュリティ保護	作業用安全ロック
騒音レベル	<54dB
動作原理	3D モーション モードを使用してサンプルを粉碎する
サイズ	210*140*150mm
重さ	2Kg

製品特長

1. ポータブルなデザイン、小型、軽量、持ち運びが簡単。
2. 高スループット、優れた効果、高速かつ正確。
3. 溶解、粉碎、均質化のための強力な攪拌。
4. 簡単操作と安全設計で安心してご使用いただけます。
5. ポータブルモバイル電源アダプター、いつでもどこでも使用できます。

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。