

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



연구 장비

휴대용 조직 분쇄기

ZZYM

휴대용 조직 분쇄기는 모발, 가래, 식물, 식품, 미생물 등 다양한 조직을 신속하게 분쇄할 수 있으며, 실험실 및 현장에서 사용 가능합니다.


<https://www.labballmill.com/ko/products/research-equipment/portable-tissue-grinder.html>

Generated at 2026-07-28 14:57:16






제품 개요

휴대용 조직 분쇄기는 모발, 가래, 식물, 식품, 미생물 등 다양한 조직을 신속하게 분쇄할 수 있으며, 실험실 및 현장에서 사용 가능합니다.

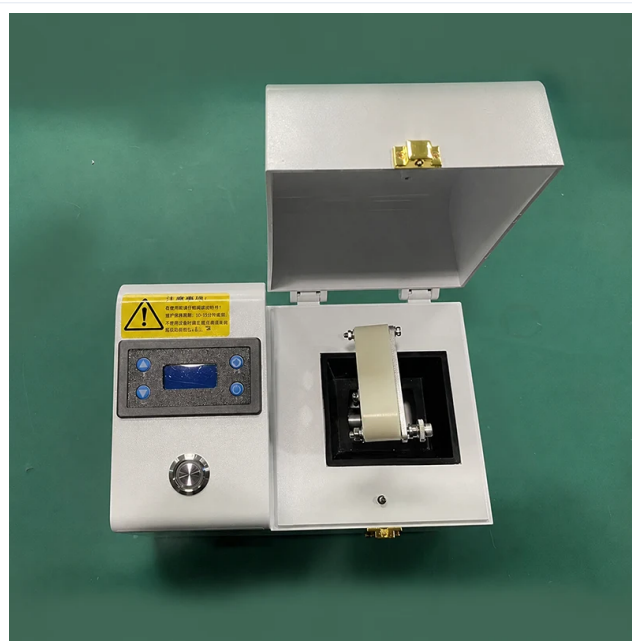

제품 소개

휴대용 티슈 분쇄기는 수평 방향으로 3차원 이동을 수행하여 시료를 분쇄합니다. 분쇄 볼/비드의 관성은 높은 에너지로 호 모양의 내부 표면에 위치한 시료 재료에 충격을 가하여 분쇄 및 분쇄 효과를 얻습니다. 어댑터의 움직임과 내부 볼의 움직임을 겹쳐 시료를 완전히 혼합할 수 있습니다.

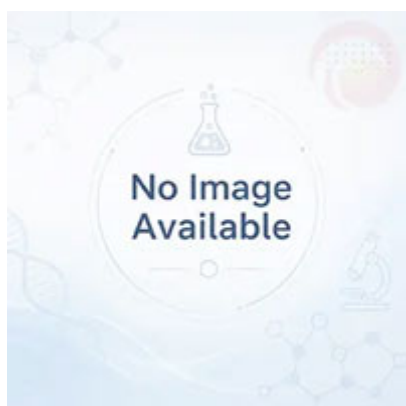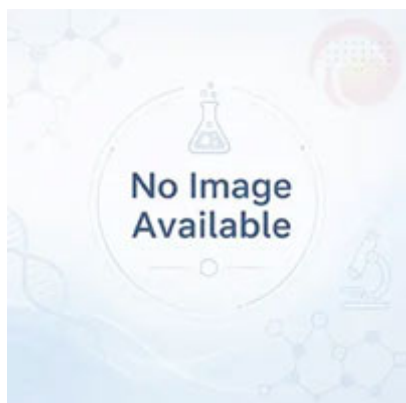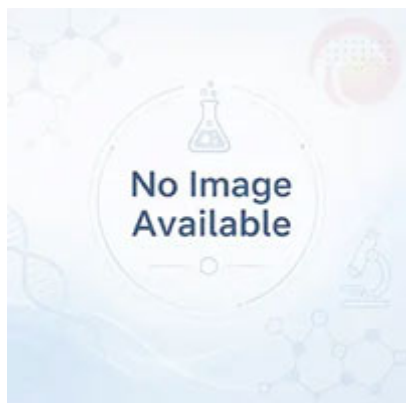



모발, 가래, 식물, 식품, 미생물 등 다양한 조직의 분쇄에 적합합니다.

기술적인 매개변수

모델	ZZYM-06
처리량	5ml*2/2ml*4/2ml*6
공급 전압	DC12V
배터리 용량	6000mAh
분쇄시간	1-9999S 임의로 조정 가능
보안 보호	작업 안전 잠금 장치
소음 수준	<54dB
작동 원리	3D 모션 모드를 사용하여 샘플 분쇄
크기	210*140*150mm
무게	2Kg

제품 특징

1. 휴대하기 쉬운 휴대용 디자인, 소형 및 경량.
2. 높은 처리량, 좋은 효과, 빠르고 정확합니다.
3. 용해, 분쇄 또는 균질화를 위한 강력한 교반.
4. 간단한 조작과 안전한 설계로 안전한 작동을 보장합니다.
5. 휴대용 모바일 전원 어댑터는 언제 어디서나 사용할 수 있습니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.