

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Портативный гомогенизатор тканей

ZZYM

Портативный гомогенизатор тканей для измельчения волос, мокроты, растений, продуктов, микроорганизмов.

<https://www.labballmill.com/ru/products/research-equipment/portable-tissue-grinder.html>


Generated at 2026-07-28 14:57:09



TENCAN




Обзор продукта

Портативный гомогенизатор тканей для измельчения волос, мокроты, растений, продуктов, микроорганизмов.

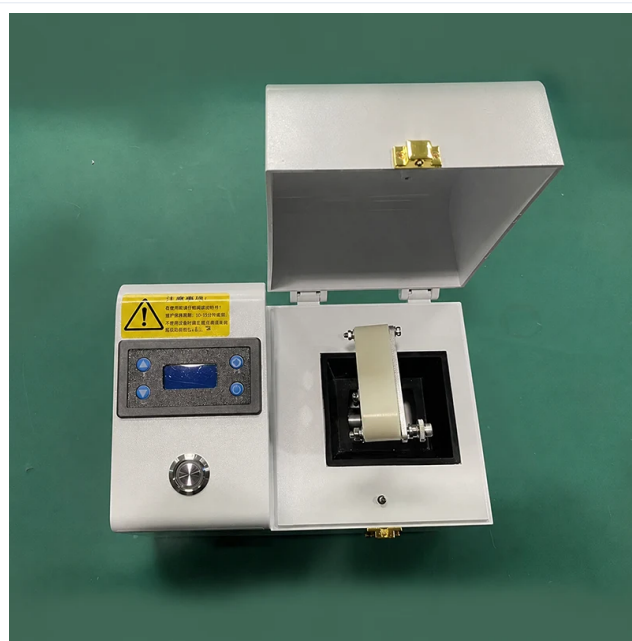

Описание продукта

Портативный измельчитель тканей выполняет трехмерное движение в горизонтальном направлении для измельчения образца. Инерция мелющих шаров/шариков заставляет их с высокой энергией воздействовать на материал пробы, расположенный на дугообразной внутренней поверхности, тем самым достигается эффект дробления и измельчения. Движение адаптера можно совмещать с движением внутреннего шарика для тщательного перемешивания образца.

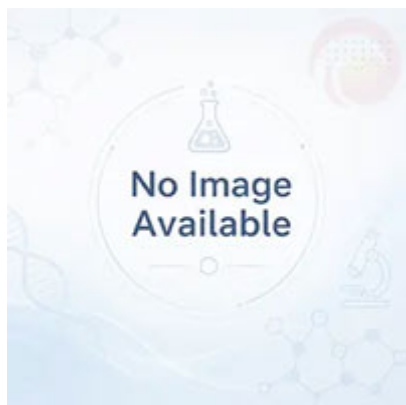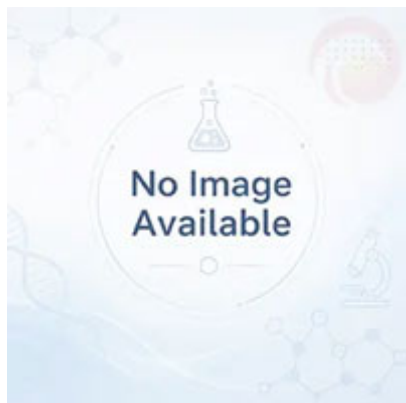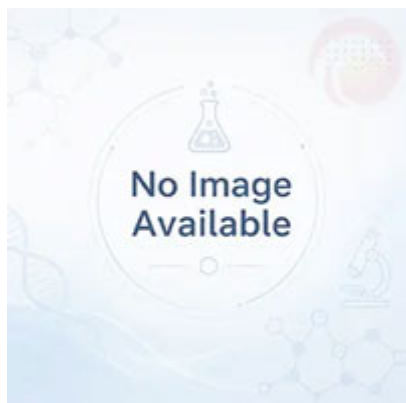



Он подходит для измельчения различных тканей, таких как волосы, мокрота, растения, продукты питания и микроорганизмы.

Технические параметры

модель	ZZYM-06
Пропускная способность	5мл*2/2мл*4/2мл*6
Напряжение питания	DC12V
Емкость аккумулятора	6000mAh
Время шлифования	1-9999S произвольно регулируемый
Защита безопасности	замок безопасности работы
Уровень шума	<54 дБ
Принцип работы	Используйте режим 3D-движения для измельчения образцов
размер	210*140*150 мм
масса	2Kg

Особенности продукта

1. Портативный дизайн, небольшой размер и легкий вес, легко носить с собой.
2. Высокая производительность, хороший эффект, скорость и точность.
3. Мощное перемешивание для лизиса, измельчения или гомогенизации.
4. Простое управление и безопасная конструкция обеспечивают безопасную работу.
5. Портативный мобильный адаптер питания, можно использовать в любое время и в любом месте.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.